V501/2 - Ablenkung eines Elektronenstrahls im elektrischen Feld und im transversalen Magnetfeld

Jan Herdieckerhoff jan.herdieckerhoff@tu-dortmund.de

Karina Overhoff karina.overhoff@tu-dortmund.de

Durchführung: 16.04.2019, Abgabe: 23.04.2019

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel		4
2	The	orie	4
	2.1	Theoretische Grundlage im elektrischen Feld	4
		2.1.1 Aufbau einer Kathodenstrahlröhre	4
		2.1.2 Berechnung der Ablenkung eines Elektronenstrahls im elektrischen	
		Feld	5
	2.2	2.1.3 Der Kathodenstrahl-Oszillograph	6
	2.2	Theoretische Grundlage im magnetischen Feld	6
		2.2.1 Berechnung der Elektronenbahn im homogenen Magnetfeld2.2.2 Bestimmung der spezifischen Elektronenladung	6 7
		2.2.3 Das Helmholtz-Spulenpaar	7
		2.2.4 Erdmagnetfeld	7
3	Eahl	<u> </u>	
3	reni	errechnung	7
4		chführung	8
	4.1	Messung im elektrischen Feld	8
		4.1.1 Proportionalität zwischen Leuchtfleckverschiebung und Ablenk-	0
		spannung	8
	4.2	4.1.2 Kathodenstrahl-Oszillograph	8
	4.2	4.2.1 Messung der spezifischen Elektronenladung	9
		4.2.2 Messung der Intensität des lokalen Erdmagnetfeldes	9
5	Aus	wertung	9
•	5.1	_	10
		5.1.1 Proportionalität zwischen Leuchtfleckverschiebung und Ablenk-	
		spannung	10
			14
	5.2		14
		9 1	14
		5.2.2 Bestimmung der Intensität des lokal Erdmagnetfelds	16
6	Disk	ussion	17
	6.1		17
		6.1.1 Proportionalität zwischen Leuchtfleckverschiebung und Ablenk-	
		1 0	17
	6.0		17
	6.2		17 17
		9 1	17 17
	6.3	8	$\frac{17}{17}$

Literatur 18

1 Ziel

Das Ziel dieses Versuches ist es, mithilfe der Ablenkung eines Elektronenstrahls im elektrischen sowie im transversalen Magnetfeld bestimmte Eigenschaften zu untersuchen. Dazu zählen die spezifische Elektronenladung, die Intensität des Erdmagnetfeldes und die Proportionalität zwischen der Verschiebung des Leuchtflecks des Elektronenstrahls und der angelegten Ablenkspannung. Außerdem soll ein Kathodenstrahl- Oszillograph untersucht werden.

2 Theorie

Für beide Versuchsteile wird eine Röhre verwendet, in der ein Vakuum erzeugt wurde. Dafür wird die so genannte Kathodenstrahlröhre bis auf einen Restdruck von ca. $1 \cdot 10^{-6}$ mbar evakuiert.

2.1 Theoretische Grundlage im elektrischen Feld

2.1.1 Aufbau einer Kathodenstrahlröhre

Die Kathodenstrahlröhre besteht im Wesentlichen aus drei Bauteilen (siehe Abb. 1). Zum einen gibt es eine Elektronenkanone, die freie Elektronen erzeugt und beschleunigt und in der diese zu einem Strahl fokussiert werden. Außerdem gibt es ein Ablenk- und ein Nachweissystem.

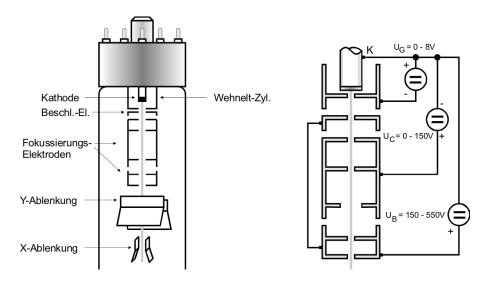


Abbildung 1: Der Aufbau einer Kathodenstrahlröhre. [1]

Die Elektronen werden hierfür durch Glühemission in einem bis zur Rotglut erhitzten Draht erzeugt. Die Kathode ist von einem Wehnelt-Zylinder umgeben. Mit seinem negativen Potential kann die Intensität des Elektronenstrahls gesteuert weden. Vor dem

Zylinder befindet sich eine positiv geladene Elektrode, die dafür sorgt, dass sich die freien Elektronen, die die Barriere des Zylinders überwinden, auf eine Geschwindigkeit $v_{\rm z}$ beschleunigen. Mit dem Energiesatz ergibt sich dann

$$\frac{m_0 v_{\rm Z}^2}{2} = e_0 U_{\rm B}. \tag{1}$$

Hinter der Elektrode befinden sich weitere Elektroden, die dafür da sind, den Strahl zu fokussieren. Der gebündelte Strahl fällt am Ende der Apparatur auf einen Leuchtschirm, auf dem die auftreffenden Elektronen die Aktivatorzentren zur Emission von Lichtquanten anregen. Der Leuchtschirm ist mit der Beschleunigungselektrode verbunden, sodass er sich nicht negativ laden kann. Das Ablenksystem besteht aus zwei Plattenpaaren, deren Normalen senkrecht aufeinander stehen. Legt man eine Spannung an diese Platten an, übt das davon erzeugte E-Feld eine Kraft auf den Elektronenstrahl aus.

2.1.2 Berechnung der Ablenkung eines Elektronenstrahls im elektrischen Feld

Die folgenden Gleichungen können in Abb. 2 grafisch nachvollzogen werden.

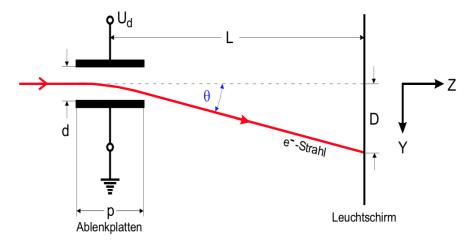


Abbildung 2: Schematische Darstellung der Ablenkung des Elektronenstrahls in der Kathodenstrahlröhre. [1]

Ist der Plattenabstand d klein gegen die Plattenlänge p der Ablenkplatten, kann man annehmen, dass das elektrische Feld homogen ist und sich die Feldstärke zu

$$E = \frac{U_{\rm d}}{d}$$

ergibt. Auf ein Elektron wirkt dann die entsprechende Kraft, die außerhalb der Platten null wird. Diese Kraft ist konstant, wodurch sich eine Beschleunigung in y-Richtung ergibt. Die erreichte Geschwindigkeit ist

$$v_{\rm y} = \frac{e_0}{m_0} \frac{U_{\rm d}}{d} \Delta t.$$

Mit der Plattenlänge und der gleichförmigen Geschwindigkeit $v_{\rm z}$ ergibt sich Δt zu

$$\Delta t = \frac{p}{v_{\rm z}}.$$

Dieser Ausdruck kann in die vertikale Geschwindigkeit $v_{\rm y}$ eingesetzt werden. Der Winkel θ der Richtungsänderung setzt sich aus der Division von $v_{\rm y}$ durch $v_{\rm z}$ zusammen. Damit ergibt sich für die Verschiebung D des Leuchtflecks

$$D = L \theta = \frac{e_0}{m_0} L \frac{U_{\rm d}}{d} \frac{p}{v_{\rm z}^2}.$$

Mit Gleichung (1) ergibt sich dann

$$D = \frac{p}{2d} L \frac{U_{\rm d}}{U_{\rm R}}.$$
 (2)

2.1.3 Der Kathodenstrahl-Oszillograph

Mit einem Kathodenstrahl-Oszillographen kann die Zeitabhängigkeit von Wechselspannungen darstellt werden. Dazu wird an das Plattenpaar, das den Strahl in horizontaler Richtung ablenkt, eine Sägezahnspannung angelegt. An das Plattenpaar, das den Strahl vertikal ablenkt, wird die zu untersuchende Spannung angelegt. Wenn die Synchronisationsbedingung

$$n \, \nu_{\mathrm{S\ddot{a}}} = m \, \nu_{\mathrm{We}}$$

erfüllt ist, wird der Verlauf der Wechselspannung auf dem Leuchtschirm angezeigt.

2.2 Theoretische Grundlage im magnetischen Feld

Elektrische Felder üben auf ruhende Ladungen eine Kraft aus. Magnetostatische Felder dagegen üben nur auf Ladungen, die sich relativ zum Feld bewegen, eine Kraft aus.

2.2.1 Berechnung der Elektronenbahn im homogenen Magnetfeld

Eine Ladung q, die sich mit der Geschwindigkeit \vec{v} in einem homogenen Magnetfeld \vec{B} bewegt, erfährt die Lorentz-Kraft

$$\vec{F}_{\rm L} = q \, \vec{v} \times \vec{B}.\tag{3}$$

Die Lorentz-Kraft ist nur nicht null, wenn es eine Geschwindigkeitskomponente \vec{v} gibt, die senkrecht zu \vec{B} ausgerichtet ist.

Das Magnetfeld ändert allerdings nur die Richtung und ändert nicht die Geschwindigkeit. Also ist die Energie konstant innerhalb des Systems der Ladung.

Der Krümmungsradius r der Bahn lässt sich aus dem Gleichgewicht der Lorentz- und der Zentrifugalkraft bestimmen. Es ergibt sich

$$r = \frac{m_0 v_0}{e_0 B}.\tag{4}$$

Die rechte Seite der Gleichung ist konstant, insofern ist die Krümmungsbahn eine Kreisbahn.

2.2.2 Bestimmung der spezifischen Elektronenladung

Mit Gleichung 4 lässt sich die spezifische Ladung der Elektronen e_0/m_0 bestimmen. Mit der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}$ ergibt sich die konstante Geschwindigkeit v_0 zu

$$v_0 = \sqrt{2 U_{\rm B} \frac{e_0}{m_0}}.$$

In einem feldfreien Raum bewegen sich die Elektronen eines Kathodenstrahls in Richtung Mittelpunkt des Leuchtschirms und erzeugen einen Leuchtfleck. Wenn das Magnetfeld eingeschaltet wird, verschiebt sich der Leuchtfleck aufgrund der Krümmung auf der vertikalen Achse um das Stück D. Zwischen dem Wirkungsbereich L (das ist die Weite zwischen der Quelle und dem Schirm), dem Stück D und dem Radius r ergibt sich über den Satz des Pythagoras die Verbindung

$$r = \frac{L^2 + D^2}{2D}.$$

Dies kann in 4 eingesetzt werden. Damit ergibt sich der Zusammenhang

$$\frac{D}{L^2 + D^2} = \frac{1}{\sqrt{8 U_{\rm B}}} \sqrt{\frac{e_0}{m_0}} B. \tag{5}$$

2.2.3 Das Helmholtz-Spulenpaar

Ein Helmholtz-Spulenpaar kann ein homogenes Magnetfeld erzeugen. Der Radius R beider Spulen entspricht dem Spulenabstand. Die Windungszahl N der Spulen ist ebenfalls identisch. Im Mittelpunkt ist die Flussdichte B durch

$$B = \mu_0 \, \frac{8}{\sqrt{125}} \, \frac{NI}{R} \tag{6}$$

gegeben.

2.2.4 Erdmagnetfeld

Die Totalintensität des Erdmagnetfelds ergibt sich mit der horizontal Komponente $B_{\rm horizontal}$ und dem Winkel φ zu

$$B_{\text{total}} = \frac{B_{\text{horizontal}}}{\cos \varphi}.$$
 (7)

3 Fehlerrechnung

Der Mittelwert einer Stichprobe von N Werten wird durch

$$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i \tag{8}$$

bestimmt.

Die Standardabweichung der Stichprobe wird berechnet mit:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}.$$

Die realtive Abweichung zwischen zwei Werten kann durch

$$\frac{a-b}{a}$$

bestimmt werden.

4 Durchführung

4.1 Messung im elektrischen Feld

Im ersten Teil des Versuches soll die Proportionalität zwischen der Leuchtfleckverschiebung und der Ablenkspannung bestimmt werden. Außerdem soll das Kathodenstrahl-Oszilloskop untersucht werden.

4.1.1 Proportionalität zwischen Leuchtfleckverschiebung und Ablenkspannung

Im ersten Teil werden die Leuchtfleckverschiebung und die Ablenkspannung $U_{\rm d}$ für fünf verschiedene Beschleunigungsspannungen $U_{\rm B}$ zwischen 180 und 380 V in 50 V Schritten gemessen, um die Proportionalität zwischen diesen beiden Größen zu bestimmen. Dazu wird für jede Beschleungigungsspannung der Leuchtfleck nacheinander auf die neun Linien des Koordinatennetzes geregelt. Es wird jeweils die Ablenkspannung abgelesen.

4.1.2 Kathodenstrahl-Oszillograph

Es wird ein einfacher Kathodenstrahl-Oszillograph (Abb. 3) aufgebaut und versucht durch Variation der Sägezahnfrequenz stehende Bilder der Sinusspannung auf dem Leuchtschirm zu erhalten. Das ist immer dann der Fall, wenn Sägezahn- und Sinusfrequenz ein rationales Verhältnis bilden. Es sollen die Fälle $n=\frac{1}{2},\,1,\,2$ und 3 realisiert und dabei die Sägezahnfrequenzen abgelesen werden.

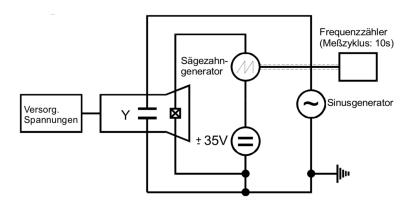


Abbildung 3: Schaltbild eines Kathodenstrahl-Oszillographen. [1]

4.2 Messung im Magnetfeld

In diesem Versuchsteil sollen die spezifische Elektronenladung und die Intensität des lokalen Erdmagnetfeldes bestimmt werden.

4.2.1 Messung der spezifischen Elektronenladung

Um die spezifische Elektronenladung zu bestimmen, wird mittels eines großen Helmholtz-Spulenpaars ein nahezu homogenes Magnetfeld, das senkrecht zum Elektronenstrahl einer Kathodenstrahlröhre ausgerichtet ist, erzeugt. Nach der korrekten Ausrichtung mithilfe eines speziellen Kompasses wird bei konstanten Beschleungigungsspannungen $U_B=250\,\mathrm{V}$ und 360 V die Strahlverschiebung D in Abhängigkeit von den beiden Magnetfeldstärken gemessen. Dazu wird jeweils die Stromstärke, die eingestellt werden muss, um den Leuchtfleck auf die neun Linien des Koordinatennetzes zu bewegen, abgelesen.

4.2.2 Messung der Intensität des lokalen Erdmagnetfeldes

Die Achse der Kathodenstrahlröhre wird in Nord-Süd-Richtung des Erdmagnetfeldes ausgerichtet. Die Position des Leuchtflecks in dem Koordinatennetz wird erfasst. Die Apparatur wird anschließend in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Der Leuchtfleck, dessen Position sich durch die Kraft des Feldes geändert hat, wird durch Einschalten des Helmholtz-Feldes wieder auf seine ursprüngliche Position bewegt, indem die Wirkung des Erdmagnetfeldes durch den Spulenstrom $I_{\rm hor}$ kompensiert wird. Diese Stromstärke wird aufgenommen. Anschließend wird mithilfe des speziellen Kompasses der Winkel φ zwischen der Horizontalebene und der Richtung des Erdmagnetfeldes bestimmt.

5 Auswertung

Für die Auswertung wird Python, im Speziellen matplotlib [3], SciPy [4], Uncertainties [5] und NumPy [7] benutzt.

5.1 Elektisches Feld

5.1.1 Proportionalität zwischen Leuchtfleckverschiebung und Ablenkspannung

Die gemessenen Werte für die Ablenkspannung $U_{\rm d}$ auf jeder Linie des Koordinatennetzes sind für die fünf unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen $U_{\rm B}$ in den folgenden Tabellen 1 bis 5 aufgelistet.

Tabelle 1: Die Indexwerte entsprechen der Höhe, die bei der jeweiligen Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=180\,{\rm V}$ gemessen wurden. Der Indexwert 1 entspricht einer Höhe von 0,6 cm.

Index	$U_{\rm d}/{ m V}$
1,0	-21,3
2,0	-17,9
3,0	-14,4
4,0	-11,2
5,0	-7,8
6,0	-4,6
7,0	-1,2
8,0	2,3
9,0	6,1

Tabelle 2: Die Indexwerte entsprechen der Höhe, die bei der jeweiligen Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=230\,{\rm V}$ gemessen wurden. Der Indexwert 1 entspricht einer Höhe von 0,6 cm.

Index	$U_{\rm d}/{ m V}$
1,0	-25,8
2,0	-21,8
3,0	-17,8
4,0	-13,5
5,0	-9,4
6,0	-5,2
7,0	-1,0
8,0	3,4
9,0	7,8

Tabelle 3: Die Indexwerte entsprechen der Höhe, die bei der jeweiligen Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=280\,{\rm V}$ gemessen wurden. Der Indexwert 1 entspricht einer Höhe von 0,6 cm.

Index	$U_{\rm d}/{ m V}$
1,0	-30,7
2,0	-26,0
3,0	-20,8
4,0	-15,9
5,0	-10,9
6,0	-5,8
7,0	-0.9
8,0	4,6
9,0	10,0

Tabelle 4: Die Indexwerte entsprechen der Höhe, die bei der jeweiligen Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=330\,{\rm V}$ gemessen wurden. Der Indexwert 1 entspricht einer Höhe von 0,6 cm.

Index	$U_{\rm d}/{ m V}$
1,0	-36,1
2,0	-30,1
3,0	-24,4
4,0	-18,3
5,0	-12,6
6,0	-6,8
7,0	-0,6
8,0	5,7
9,0	12,1

Tabelle 5: Die Indexwerte entsprechen der Höhe, die bei der jeweiligen Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=380\,{\rm V}$ gemessen wurden. Der Indexwert 1 entspricht einer Höhe von 0,6 cm.

Index	$U_{\rm d}/{ m V}$
1,0	nan
2,0	-34,6
3,0	-27,7
4,0	-21,0
5,0	-14,3
6,0	-7,5
7,0	-0,4
8,0	6,8
9,0	13,6

Die Leuchtfleckverschiebung D ist in Tab. 6 und in Abb. 4 für die fünf Beschleunigungsspannungen gegen das Verhältnis aus Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}$ aufgetragen.

Tabelle 6: Das Verhältnis der Ablenkspannung und der Beschleunigungsspannung aufgetragen gegen die Höhe auf dem Graphen.

$\frac{U_{\rm d, \ 1}}{U_{\rm B, \ 1}}$	$\frac{U_{\rm d, 2}}{U_{\rm B, 2}}$	$\frac{U_{\rm d, \ 3}}{U_{\rm B, \ 3}}$	$\frac{U_{\rm d, \ 4}}{U_{\rm B, \ 4}}$	$\frac{U_{\rm d, 5}}{U_{\rm B, 5}}$	D/m
-0,12	-0,11	-0,11	-0,11		0,00
-0,10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	0,60
-0.08	-0.08	-0.07	-0.08	-0.07	1,20
-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1,80
-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	2,40
-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	3,00
-0,01	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	3,60
0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	4,20
0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	4,80

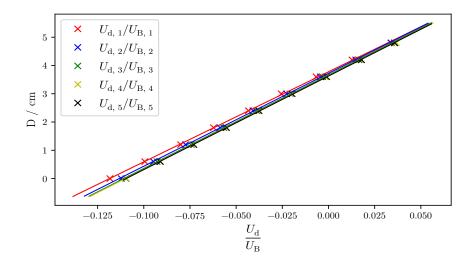


Abbildung 4: Die Leuchtfleckverschiebung D ist gegen das Verhältnis aus Ablenkspannung $U_{\rm d}$ und Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}$ aufgetragen. Es sind die Daten für die fünf verschiedenen Beschleunigungsspannungen und jeweils einen Fit eingezeichnet.

Aus dem Fit in Abb. 4 lässt sich die Steigung $\frac{pL}{2d}$ experimentell bestimmen:

$$\begin{split} U_{\rm B} &= 180\,{\rm V} \Rightarrow \frac{pL}{2d} = (31,\!88 \pm 0,\!22)\,{\rm cm} \\ U_{\rm B} &= 230\,{\rm V} \Rightarrow \frac{pL}{2d} = (32,\!86 \pm 0,\!18)\,{\rm cm} \\ U_{\rm B} &= 280\,{\rm V} \Rightarrow \frac{pL}{2d} = (33,\!09 \pm 0,\!22)\,{\rm cm} \\ U_{\rm B} &= 330\,{\rm V} \Rightarrow \frac{pL}{2d} = (33,\!05 \pm 0,\!22)\,{\rm cm} \\ U_{\rm B} &= 380\,{\rm V} \Rightarrow \frac{pL}{2d} = (33,\!10 \pm 0,\!15)\,{\rm cm}. \end{split}$$

Der mit Gleichung (8) errechnete Mittelwert für die Steigung ist

$$\frac{pL}{2d} = (32.8 \pm 0.5) \,\mathrm{cm}.$$

Die angegebenen Werte für die Plattenlänge p, den Plattenabstand d und den Strahlweg L sind

$$p = 1.9 \,\mathrm{cm}$$

 $d = 0.38 \,\mathrm{cm}$
 $L = 14.3 \,\mathrm{cm}$.

Der aus diesen Werten theoretisch berechnete Wert für die Steigung ist

$$\frac{pL}{2d} = 35,75 \,\text{cm}.$$

5.1.2 Bestimmung der Frequenz der Sinusspannung

Die gemessenen Synchronisationsfrequenzen sind in Tabelle 7 zu finden.

Tabelle 7: Die Frequenzen der Sägezahnspannung.

$\nu_{\rm S\ddot{a}}/{\rm Hz}$
25,02
49,95
99,99
149,97

Durch das Synchronisationsverhältnis kann jeweils die Frequenz der Sinusspannung bestimmt werden:

$$\begin{split} \nu_{0.5} &= 50,\!04\,\mathrm{Hz} \\ \nu_1 &= 49,\!95\,\mathrm{Hz} \\ \nu_2 &= 49,\!995\,\mathrm{Hz} \\ \nu_3 &= 49,\!99\,\mathrm{Hz}. \end{split}$$

Der daraus mit Gleichung (8) berechnete Mittelwert ergibt sich zu

$$\nu_{\rm mittel} = (49{,}994 \pm 0{,}032)\,{\rm Hz}.$$

5.2 Magnetfeld

5.2.1 Bestimmung der spezifischen Elektronenladung

Die Strahlverschiebung D in Abhängigkeit von der Flussdichte B für eine Beschleunigungsspannung von $U_{\rm B}=250\,{\rm V}$ ist in Tabelle 8 aufgeführt. Die Strahlverschiebung in Abhängigkeit von der Flussdichte für eine Beschleunigungsspannung von $U_{\rm B}=360\,{\rm V}$ befindet sich in Tabelle 9.

Tabelle 8: Die Indexwerte entsprechen der Höhe bei dem jeweiligen Strom und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=250\,{\rm V}.$

Index	I/A
1,00	0,00
2,00	$0,\!25$
3,00	0,63
4,00	1,00
5,00	$1,\!35$
6,00	1,68
7,00	2,05
8,00	2,40
9,00	2,75

Tabelle 9: Die Indexwerte entsprechen der Höhe bei dem jeweiligen Strom und der Beschleunigungsspannung $U_{\rm B}=360\,{\rm V}.$

Index	I/A
1,00	0,00
2,00	$0,\!33$
3,00	0,75
4,00	1,18
$5,\!00$	$1,\!55$
6,00	1,95
7,00	$2,\!38$
8,00	2,80
9,00	3,23

Der Term $\frac{D}{L^2+D^2}$ ist für beide Beschleunigungsspannungen in Tab. 10 und in Abb. 5 aufgetragen. Dabei ist L der Strahlweg und hat einen Wert von

$$L = 14.3 \, \text{cm},$$

wie bereits in Abschnitt 5.1.1 erwähnt.

Tabelle 10: Das Verhältnis des magnetischen Feldes durch die Wurzel der Beschleunigungsspannung aufgetragen gegen die Verschiebung D durch die Summe des Wirkungsbereichs L zum Quadrat und der Verschiebung D zum Quadrat.

$\frac{B_1}{\sqrt{8U_{\rm B,1}}}/{\rm HV}^{-\frac{1}{2}}$	$\frac{B_2}{\sqrt{8U_{\rm B,2}}}/{\rm HV^{-\frac{1}{2}}}$	$\frac{D}{(L^2+D^2)}\big/\frac{1}{\mathrm{m}}$
0,00	0,00	0,00
$3{,}56\cdot10^{-7}$	$3,86 \cdot 10^{-7}$	$0,\!29$
$8,91\cdot10^{-7}$	$8,91 \cdot 10^{-7}$	$0,\!58$
$1,43 \cdot 10^{-6}$	$1,40 \cdot 10^{-6}$	0,87
$1,93 \cdot 10^{-6}$	$1,84 \cdot 10^{-6}$	$1{,}14$
$2,39 \cdot 10^{-6}$	$2,32 \cdot 10^{-6}$	$1,\!41$
$2,92\cdot10^{-6}$	$2,82 \cdot 10^{-6}$	1,66
$3,42 \cdot 10^{-6}$	$3,33 \cdot 10^{-6}$	1,89

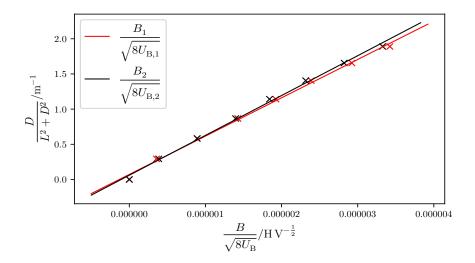


Abbildung 5: $\frac{D}{L^2+D^2}$ gegen $\frac{B}{\sqrt{8U_{\rm B}}}$ aufgetragen. Es sind die Daten und die Fits für beide Beschleunigungsspannungen eingetragen.

Durch die quadrierte Steigung der beiden Fits lässt sich die spezifische Elektronenladung experimentell bestimmen. Diese ergibt sich zu

$$\frac{e_0}{m_0} = (3.09 \pm 0.12) \cdot 10^{11} \, \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kg}}.$$

Der Literaturwert liegt bei

$$\frac{e_0}{m_0} = 1,7588 \cdot 10^{11} \, \frac{\text{C}}{\text{kg}}.$$

5.2.2 Bestimmung der Intensität des lokal Erdmagnetfelds

Der Spulenstrom, der nötig ist, um das Erdmagnetfeld zu kompensieren, beträgt

$$I_{\text{hor}} = 0.19 \,\text{A}.$$

Der Winkel zwischen Horizontalebene und Richtung des Erdmagnetfelds beträgt

$$\varphi = 79.5^{\circ}$$
.

Aus diesen beiden Werten lässt sich mittels Gleichung (7) die Totalintensität des lokalen Erdmagnetfelds bestimmen. Diese ergibt sich zu

$$B_{\text{total}} = 66.5 \,\mu\text{T}.$$

Der Literaturwert für das Erdmagnetfeld in Europa [6] liegt bei ca.

$$B_{\text{total, lit}} = 49.4 \,\mu\text{T}.$$

6 Diskussion

6.1 Elektrisches Feld

Im Folgenden wird die Auswertung der Ablenkung eines Elektronenstrahls durch ein elektrisches Feld diskutiert.

6.1.1 Proportionalität zwischen Leuchtfleckverschiebung und Ablenkspannung

Die durchschnittliche Steigung der Fits hat einen relativen Fehler von $1,52\,\%$ und weicht von der theoretischen Steigung um $8,25\,\%$ ab. Damit sind die Ergebnisse als relativ gut zu bewerten.

6.1.2 Bestimmung der Frequenz der Sinusspannung

Die ermittelte Sinusfrequenz hat einen relativen Fehler von 0,06 %. Auch hier ist der Fehler relativ klein, weshalb die Messung als ziemlich gut bewertet werden kann.

6.2 Magnetfeld

In diesem Teil wird die Auswertung der Ablenkung eines Elektronenstrahls durch ein magnetisches Feld diskutiert.

6.2.1 Bestimmung der spezifischen Elektronenladung

Für den Wert der spezifischen Elektronenladung ergibt sich ein relativer Fehler von 3,88 %. Die relative Abweichung zum Literaturwert beträgt 75,69 %. Der relative Fehler ist zwar recht klein, aber trotzdem weicht das Ergebnis ziemlich stark ab. Grund dafür ist vermutlich, dass das Inklinatorium nicht sehr exakt war. Das lag vor allem daran, dass die Aufhängung nicht komplett reibungsfrei war.

6.2.2 Bestimmung der Intensität des lokal Erdmagnetfelds

Das Erdmagnetfeld, das sich durch die Messung ergeben hat, weicht vom Literaturwert um 34,6 % ab. Auch hierbei ist die Messung nicht sehr exakt gewesen, was wieder mit dem schlecht kalibrierten Inklinatorium in Verbindung gebracht werden kann.

6.3 Fazit

Abschließend kann gesagt werden, dass die Messung im ekeltrischen Feld deutlich exakter und näher an den Theoriewerten lag, als bei der zweiten Messung, bei der die Abweichung von den Literaturwerten doch als recht groß einzuschätzen ist.

Literatur

- [1] TU Dortmund. Versuch 501 Ablenkung eines Elektronenstrahls im elektrischen Feld. 2019. URL: http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V501.pdf.
- [2] TU Dortmund. Versuch 502 Ablenkung eines Elektronenstrahls im transversalen Magnetfeld. 2019. URL: http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V502.pdf.
- [3] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [4] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u.a. "SciPy: Open source scientific tools for Python". Version 0.16.0. In: (). URL: http://www.scipy.org/.
- [5] Eric O. Lebigot. "Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties". Version 2.4.6.1. In: (). URL: http://pythonhosted.org/uncertainties/.
- [6] "Messung des Erdmagnetfeldes in der PTB". In: (2019). URL: https://www.ptb.de/cms/nc/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-25/ag-251/live-daten-erdmagnetfeldmessung.html.
- [7] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://www.numpy.org/.